

Фармахем Лабораторија за животна средина

Фармахем Лабораторија за животна средина е акредитирана лабораторија за тестирање и калибрација по стандардот MKC EN ISO 17025:2006. Опсегот на акредитација е проширен со методата за калибрација на пипети со клип согласно на ISO 8655.



Калибрацијата на пипети е важен дел од секоја лабораториска рутина и потврда дека вашите пипети со клип работат правилно и ги исполнуваат очекувањата. Калибрацијата е од огромна важност кога работите по стандардни методи или воопшто при секоја анализа каде точноста и прецизноста имаат директно влијание врз квалитетот на анализата.

Кој има потреба од калибрација?

Акредитирани лаборатории

Биохемиски лаборатории

Лаборатории на здравствените установи

Лаборатории на фармацевтската индустрија

Други индустриски лаборатории

Колку често треба да се врши калибрација на пипети со клип?

ISO 8655 препорачува калибрацијата да се врши во период од 3 месеци до еднаш годишно, но тоа зависи и од повеќе фактори:

- потребната прецизност;
- фреквенцијата на користење;
- бројот на оператори кои работат со пипетата;
- течноста која се пипетира.

Калибрацијата може да се врши и надвор од овие рамки кога постои причина или сомневање за неправилно работење на пипетата со клип.

Опсег на калибрација:
1–10 000 μ L

Лабораторијата располага со најсовремена опрема и софтвер за калибрација на пипети со клип.

Калибрацијата се врши со микровага **Mettler Toledo XR26PC**, со капацитет од 22 g и резолуција од 1 μ L, која во целост ги исполнува барањата дадени во стандардот МКС EN ISO 8655-6:2009 за калибрација на микропипети и до 1 μ L, а податоците од калибрацијата се обработуваат со најсофистициран софтвер **Mettler Toledo - Calibry**.



**Вршме калибрација
на секаков вид
пипети со клип
од сите произведувачи**



**пипети со фиксен/ варијабилен
волумен**




**едноканални/ повеќеканални
пипети**



аналогни/ дигитални пипети



Опрема за вршење калибрација

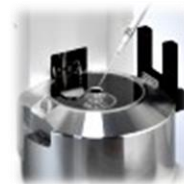

Мерењата ги вршат обучени инженери, во строго контролирани услови пропишани во стандардот. Проценката на мерната неодреденост и резултатите од калибрацијата се прикажани во Сертификат со следливост до националниот еталон што е во согласност со МКС EN ISO 17025.

Контакт:

ул. „Манчу Матак“ бр. 23
1060 Скопје, Р. Македонија
тел.: +389 2 20 50 648
факс: +389 2 20 31 434
ekolab@farmahem.com.mk
www.farmahem.com.mk



**ФАРМАХЕМ
ФАРМАЦЕМ**